

**NAVODILA ZA ODVZEM
PITNE VODE
ZA
MIKROBIOLOŠKO PRESKUŠANJE**

Oktober, 2020



KAZALO

Navodilo za odvzem pitne vode iz pipe	3
Navodilo za odvzem pitne vode iz izvira	4
Navodilo za odvzem pitne vode iz vodnjaka	5
Navodilo za odvzem pitne vode iz vodnjaka s črpalko in pipo	6



Navodilo za odvzem pitne vode iz pipe

1. Pred vzorčenjem si temeljito umijte roke pod tekočo vodo z milom, osušite in razkužite po navodilih NIJZ.
2. Oblecite si priložene rokavice.
3. Izberite pipo, pri kateri je možno odstraniti mrežico.
4. Odstranite mrežico in odprite pipo, da voda teče s srednjim curkom vsaj 10 minut.
5. Zaprite vodo na pipi. Z gorilnikom obžigajte pipo približno 20 sekund. V kolikor nimate gorilnika, razkužite pipo z vato/gazo, ki jo namočite v 70 % etilni alkohol. Pri tem pazite, da se ne dotikate pipe.
6. Ponovno odprite vodo na pipi in izpirajte pipo približno 2 minuti. Curek naj bo enakomeren, v laminarnem toku srednje jakosti, debeline svinčnika.
7. Embalažo odprite tik pred vzorčenjem. Obojnino strgajte in odprite pokrov embalaže. Embalaže in pokrova ne odlagajte več, temveč ju držite vsakega v eni roki. Pri odvzemu ne sme priti do stika embalaže s pipo, drugimi predmeti ali z rokami.
8. Embalažo pridržite pod curkom vode. Embalaže ne napolnite do vrha – pustite 2 cm.
9. Embalažo takoj tesno zaprite, preverite tesnost in izpolnite podatke na embalaži z vodoodpornim pisalom. Navedite ime/priimek osebe, ki je odvzela vzorec, datum in čas vzorčenja.
10. Do transporta hranite vzorec v hladilniku (od +2 do +5 °C).
11. V času transporta v izolirno torbo poleg vzorca dodajte hladilno telo (pingvin).
12. Od časa vzorčenja do predaje vzorca v laboratorij ne sme biti več kot 20 ur.

POMEMBNO:

oddaja vzorcev za mikrobiološko preskušanje je mogoča le ob **ponedeljkih in torkih** med 7. in 12. uro na naslovu Eurofins ERICo Slovenija, Koroška cesta 58, Velenje. Vzorec se odda osebno pri zaposlenem v Eurofins ERICo Slovenija. O dostavi vzorca nas predhodno obvestite na 03 898 19 53 ali 03 898 19 30*.

* V primeru nepravilne oddaje vzorca si laboratorij pridržuje pravico, da vzorec analizira naslednji delovni dan, kljub preteku 24 ur od odvzema vzorca.




Navodilo za odvzem pitne vode iz izvira

1. Pred vzorčenjem si temeljito umijte roke pod tekočo vodo z milom, osušite in razkužite po navodilih NIJZ.
2. Sterilno embalažo odprite iz ovojnine. Odprite embalažo, pokrov odložite na čisto površino tako, da gleda navzdol.
3. Embalažo potopite 30 cm pod površino izvira, v kolikor je to mogoče in zajemite vodo v nasprotni smeri toka. Ustje embalaže držite rahlo navzgor.
4. Vzorec odlijte do oznake 500 ml in takoj zaprite s pokrovom. Preverite tesnost.
5. Izpolnite podatke na embalaži, predvsem navedite ime in priimek osebe, ki je odvzela vzorec, datum in čas vzorčenja.
6. Do transporta hranite vzorec v hladilniku (od +2 do +5 °C).
7. V času transporta v izolirno torbo poleg vzorca dodajte hladilno telo (pingvin).
8. Od časa vzorčenja do predaje vzorca v laboratorij ne sme biti več kot 20 ur.

POMEMBNO:

oddaja vzorcev za mikrobiološko preskušanje je mogoča le ob **ponedeljkih in torkih** med 7. in 12. uro na naslovu Eurofins ERICo Slovenija, Koroška cesta 58, Velenje. Vzorec se odda osebno pri zaposlenem v Eurofins ERICo Slovenija. O dostavi vzorca nas predhodno obvestite na 03 898 19 53 ali 03 898 19 30*.

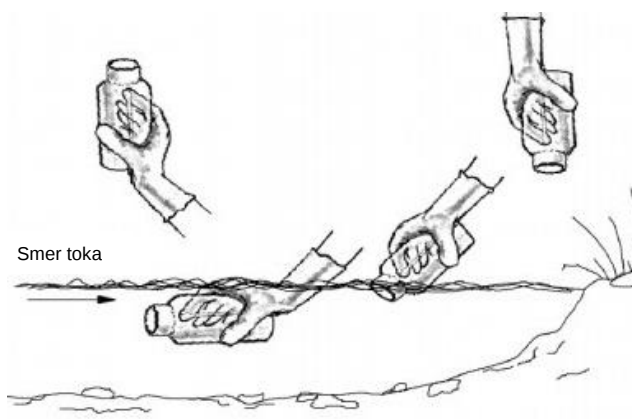

* V primeru nepravilne oddaje vzorca si laboratorij pridržuje pravico, da vzorec analizira naslednji delovni dan, kljub preteku 24 ur od odvzema vzorca.




Navodilo za odvzem pitne vode iz vodnjaka

1. Pred vzorčenjem si temeljito umijte roke pod tekočo vodo z milom, osušite in razkužite po navodilih NIJZ.
2. Sterilno embalažo odprite iz ovojnine.
3. Vzemite dovolj dolgo vrv, da bo segala pod gladino vode v vodnjaku.
4. Vrv zavežite okoli embalaže in navežite tudi težji kamen. Drug konec vrvi navijete okoli palice za lažje odvijanje.
5. Odvijte pokrovček embalaže in ga postavite na čisto površino tako, da gleda navzdol.
6. Embalažo s kamnom spustite v vodnjak po sredini. Pazite da se ne dotikate stene vodnjaka.
7. Potopite embalažo pod gladino. Počakajte nekaj sekund, da se embalaža napolni in počasi navijajte vrv na palico.
8. Vzorec odlijte do oznake 500 ml in takoj zaprite s pokrovom. Preverite tesnost.
9. Izpolnite podatke na embalaži, predvsem navedite ime in priimek osebe, ki je odvzela vzorec, datum in čas vzorčenja.
10. Do transporta hranite vzorec v hladilniku (od +2 do +5 °C).
11. V času transporta v izolirno torbo poleg vzorca dodajte hladilno telo (pingvin).
12. Od časa vzorčenja do predaje vzorca v laboratorij ne sme biti več kot 20 ur.

POMEMBNO:

oddaja vzorcev za mikrobiološko preskušanje je mogoča le ob **ponedeljkih in torkih** med 7. in 12. uro na naslovu Eurofins ERICo Slovenija, Koroška cesta 58, Velenje. Vzorec se odda osebno pri zaposlenem v Eurofins ERICo Slovenija. O dostavi vzorca nas predhodno obvestite na 03 898 19 53 ali 03 898 19 30*.

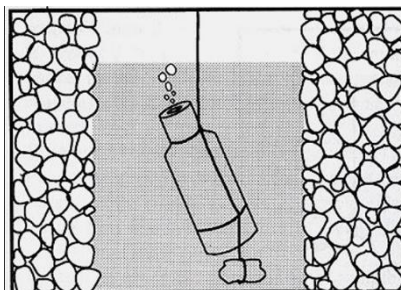

* V primeru nepravilne oddaje vzorca si laboratorij pridržuje pravico, da vzorec analizira naslednji delovni dan, kljub preteku 24 ur od odvzema vzorca.



Navodilo za odvzem pitne vode iz vodnjaka s črpalko in pipo

1. Pred vzorčenjem si temeljito umijte roke pod tekočo vodo z milom, osušite in razkužite po navodilih NIJZ.
2. Vodo predhodno črpajte od 20 do 30 minut
3. Nato očistite zunanost in notranjost pipe tako, da jo obrišete z mokro krpo in sperete. Z gorilnikom obžigajte ustje pipe cca. 1 minuto tako, da s plamenom krožite okoli ustja. V kolikor nimate gorilnika, z napojeno krpo z vsaj 70% alkoholom razkužite ustje.
4. Ponovno črpajte vodo 2 do 3 minuti.
5. Sterilno embalažo odprite iz ovojnice. Odprite embalažo, pokrov odložite na čisto površino tako, da gleda navzdol.
6. Pod tekočim cukrom vode zajemi embalažo do oznake 500 ml.
7. Zaprite embalažo in preverite tesnost.
8. Izpolnite podatke na embalaži, predvsem navedite ime in priimek osebe, ki je odvzela vzorec, datum in čas vzorčenja.
9. Do transporta hranite vzorec v hladilniku (od +2 do +5 °C).
10. V času transporta v izolirno torbo poleg vzorca dodajte hladilno telo (pingvin).
11. Od časa vzorčenja do predaje vzorca v laboratorij ne sme biti več kot 20 ur.

POMEMBNO:

oddaja vzorcev za mikrobiološko preskušanje je mogoča le ob **ponedeljkih in torkih** med 7. in 12. uro na naslovu Eurofins ERICo Slovenija, Koroška cesta 58, Velenje. Vzorec se odda osebno pri zaposlenem v Eurofins ERICo Slovenija. O dostavi vzorca nas predhodno obvestite na 03 898 19 53 ali 03 898 19 30*.



* V primeru nepravilne oddaje vzorca si laboratorij pridržuje pravico, da vzorec analizira naslednji delovni dan, kljub preteku 24 ur od odvzema vzorca.

